

Description:

DiaQuant[®] pH 3.6–6.1 are non-bleeding test strips for use in dialysis. By using DiaQuant[®] pH 3.6–6.1, a residue check for hydroxyacetic acid subsequent to heat disinfection may be carried out safely and quickly.

Measuring range:

pH 3.6–6.1

Color gradation:

pH 3.6 · 4.1 · 4.4 · 4.7 · 5.0 · 5.3 · 5.6 · 6.1

Pack content:

100 test strips

Reaction principle:

The test strips contain a chemically bound pH indicator that changes from yellow to red in the pH range 3.6 to 6.1.

General information:

Only remove the required number of test strips from the container, and then immediately close the container securely afterwards. Do not touch the test field. Ideally, the color evaluation should be carried out by diffuse daylight. Artificial light can lead to difficulties or an incorrect color reading.

Instructions for use:

1. Insert the test strip into the sample solution and keep it there until the color of the test field stops changing. If using lightly buffered solutions, insert test strip for a longer period (1–15 min).
2. Shake off any excess liquid.
3. Compare the test field with the color scale. Take the value which matches closest with the colored test field (reading accuracy: ± 0.1 pH).

Quality control:

The correct functioning of the test strips may be verified by using commercially available pH buffer solutions.

Interferences:

No interferences are known.

Storage:


Avoid exposing the test strips to sunlight or moisture. Keep container cool and dry (storage temperature between 4 °C and 30 °C). If stored correctly, the test strips may be used until the use-by-date printed on the packaging.

Additional information:

The test strip container stopper contains a non-toxic drying agent. If swallowed, drink plenty of water.

Disposal:

Dispose of used test strips as domestic waste.

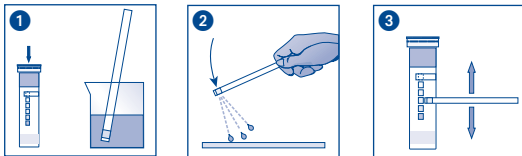

Diese Teststreifen entsprechen der Richtlinie für Medizinprodukte 93/42/EWG / These test strips conform to the Medical Device Directive 93/42/EEC. / Ces languettes test sont conformes à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux / Tiras reactivas fabricadas en conformidad con la directiva de productos sanitarios 93/42/CEE. / Deze teststrips voldoen aan de richtlijn voor medische producten 93/42/EEG. / Le presenti strisce reattive sono conformi alla direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici. / Te paski testowe są zgodne z dyrektywą dla wyrobów medycznych 93/42/EWG.	
Nicht wiederverwenden / Do not reuse / Ne pas réutiliser / Producto de un solo uso / Niet hergebruiken / Non riutilizzare / Nie używać ponownie	Hersteller / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabrikant / Fabricante / Producent
Artikelnummer / Item number / Référence produit / Referencia / Artikelnummer / Numero di catalogo / Numer artykułu	Chargencode / Batch identification / Numéro de lot / Código de lote / Productienummer / Codice del lotto / Numer partii
Achtung / Warning! / Attention! / ¡Atención! / Let op! / Attenzione! / Uwaga!	Verwendbar bis / Use by / À utiliser avant / Fecha de caducidad / Te gebruiken tot / Utilizzare entro (anno / mese) / Przydatność do użycia
Temperaturbegrenzung / Permitted storage temperature range / Limites de température / Limites de temperatura / Temperaturbegrenzung / Limite de temperatura / Ograniczenie temperatury	Trocken aufbewahren / Store in a dry place / Conserver au sec / Mantener seco / Op een droge plaats bewaren / Mantenerse asciutto / Przechowywać w suchym miejscu
Gebrauchsanweisung beachten / Please read instructions for use! / Respected les instructions d'utilisation / Observense las instrucciones de uso. / Lees de bijsluiting / Consultare le istruzioni per l'uso / Przestrzegać instrukcję użycia	Packung geschlossen halten / Keep container closed / Reformer la boîte / Mantenga el envase cerrado / Verpakking gesloten houden / Conservare la confezione chiusa / Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
Ausreichend für <n> Prüfungen / Contains sufficient for <n> tests / Contenu suffisant pour <n> tests / Contenido suficiente para <n> tests / Voldoende voor <n> tests / Contenuto sufficiente per <n> test / Wystarczająco dla kontroli <n>	

Rev 06/2013 A038017/932 003/0632